

## 保証書

### リブホット保証書

本書は本書記載の保証規定にもとづいて無償修理を行うことをお約束するものです。  
製品到着日から 1 年以内に本体に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店  
にご依頼ください。

※印欄に記入のない場合は無効となります。お手数ですがお客様ご自身でご記入ください。

|      |              |   |        |                           |
|------|--------------|---|--------|---------------------------|
| お客様  | ※お名前         | 様 | ※TEL   | (      )      -           |
|      | ※ご住所         |   | ※製造番号  | 製造番号はコントローラーの裏面に記載されています。 |
| 保証期間 | 製品到着日より 1 年間 |   | ※製品到着日 | 年      月      日           |
| 販売店  |              |   |        |                           |

#### 【保証規定】

- 保証期間内に取扱説明書、本製品添付ラベルなどの注意書きにもとづくお客様の正常な使用状況で万一故障した場合には、無償修理いたしますので、本書を添えて販売店にご依頼ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。
  - 本書の提示がない場合。
  - 故障および損傷が、お買い上げ後の不適切な輸送・落下・衝撃などお客様の取り扱いが適切でないために生じた場合。
  - 故障および損傷が、お客様の使用上の誤り、あるいは他の機器から受けた傷害または不当な改造・修理・分解による場合。
  - 故障および損傷が、火災・地震・落雷および風水害・その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ご転居、譲渡の際は、事前にお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

製造販売元 **トヨスター株式会社** 〒362-0001 埼玉県上尾市上 264-1  
総 発 売 元 **ココロカ株式会社**  
□南品川オフィス（修理受付）  
〒140-0004 東京都品川区南品川 2-2-13 南品川 JN ビル 5F  
**お客様センター フリーダイヤル：0120-22-5359**  
受付時間：月～金 9:30 ～ 12:00 13:00 ～ 18:00  
（土・日・祝日・弊社特別休業日を除く）  
□御殿山オフィス  
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 11F


90HTE001

## 家庭用温熱治療器

管理医療機器 認証番号：222AKBZX00128000

# Live-hot リブホット

## 取扱説明書

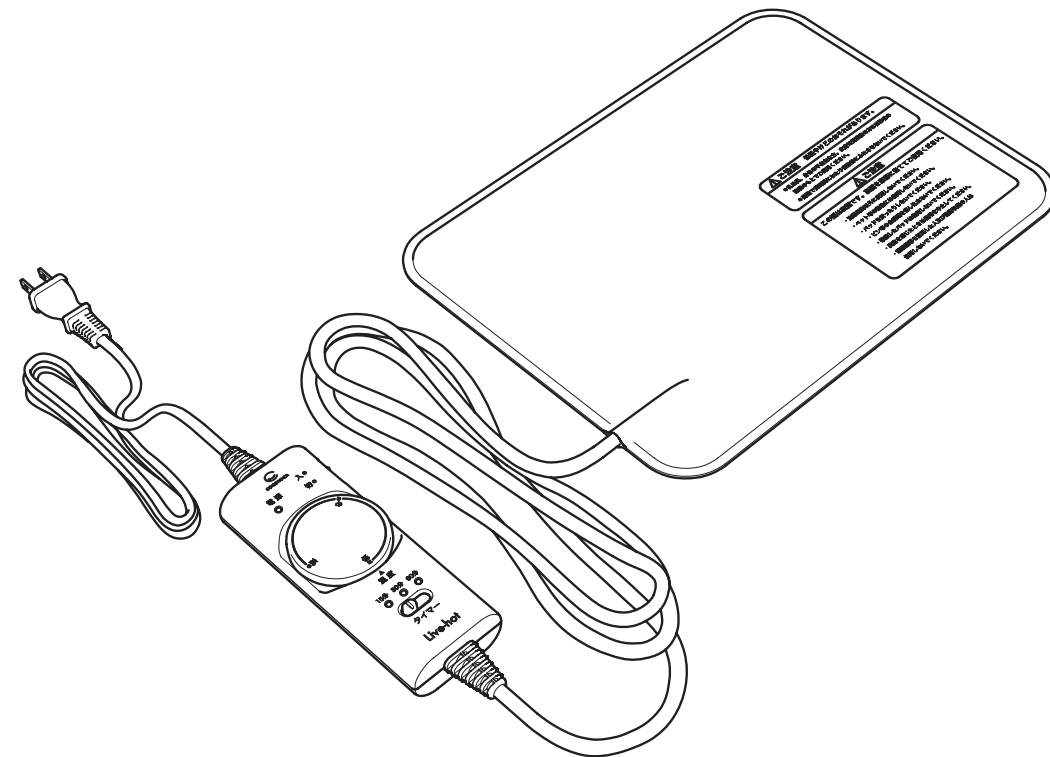

この度は、**リブホット**をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

本書はいつもお手元に置いてご使用ください。

この取扱説明書は下記のトヨスターホームページURLから入手出来ます。  
<http://toyostar.co.jp/product/controller-thermal-mat/#linkTarget>  
（保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。）

「ご使用になる前に  
安全上の」注意

製品の確認

各部の名称とはたらき

治療の方法

製品の取り扱いについて

アフターサービス・保証

故障かな？と思ったら

## もくじ

|                        |                    |     |
|------------------------|--------------------|-----|
| ■ご使用になる前に<br>（安全上のご注意） | ■マークの意味            | 3   |
|                        | ■ご使用上の注意           | 4   |
| ■製品の確認                 |                    | 7   |
| ■各部の名称とはたらき            | ■本体                | 8   |
|                        | ■バンド               | 8   |
| ■治療の方法                 | ■操作方法              | 9   |
|                        | ■治療の注意事項           | 10  |
| ■製品の取り扱いについて           | ■パッドなどのお手入れ        | 11  |
|                        | ■収納と保管の仕方          | 11  |
| ■効能効果                  |                    | 11  |
| ■仕様                    |                    | 12  |
| ■アフターサービス・保証           | ■保証期間と点検・修理について    | 12  |
|                        | ■修理の手順             | 13  |
|                        | ■修理代金のお支払い方法などについて | 13  |
| ■故障かな?と思ったら            |                    | 14  |
| 保証書                    |                    | 裏表紙 |

# 故障かな？と思ったら

| 現 象                           | 原 因                                                 | 処 置                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 電源スイッチを入れても電源表示灯が点灯せず電源が入らない。 | 電源コードのプラグがきちんと差し込まれていない。                            | プラグをきちんと差し込んでください。電源表示灯の点灯を確認してください。                          |
| パッドが温まらない。                    | 電源を入れてから設定温度に達するまで数分かかります。                          | 暫く待っても温まらない場合は、一旦電源を切り、タイマーの設定をしておしてください。タイマー表示灯の点灯を確認してください。 |
| コントローラーが熱くなる。                 | 通常の使用で、ケース外側が温くなる場合がありますが異常ではありません。                 |                                                               |
| タイマー表示灯の点滅                    | ただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。 |                                                               |

※上記の処置を行っても現象が改善されない場合は故障が考えられますので、ただちにご使用中を止し、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

# ご使用になる前に (安全上のご注意)

ご使用になる前に良くお読みください。

●ここに示した警告サインと絵表示の例は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

●表示と意味は次のようになっています。

## マークの意味

| 警告サイン                                                                                         | 内 容                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定されている内容を示します。 |
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷*1を負う可能性が想定される内容を示します。            |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人が傷害*2を負ったり物的損害*3の発生が想定される内容を示します。         |

\*1: 重傷とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。  
\*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。  
\*3: 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

| 絵表示の例                                                                                                 |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  感電注意            | △記号は注意（警告・危険を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『感電注意』を示します。          |
|  やけど注意           | △記号は注意（警告・危険を含む）を示します。具体的な注意内容は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『やけど注意』を示します。         |
|  禁止              | ○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『禁止』を示します。           |
|  分解禁止            | ○記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『分解禁止』を示します。         |
|  電源プラグをコンセントから抜く | ●記号は強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『電源プラグをコンセントから抜く』を示します。 |
|  指示              | ●記号は強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は、『指示』を示します。              |

ご使用になる前に安全上のご注意

## ご使用になる前に ( 安全上のご注意 )

### ご使用上の注意

| ⚠ 危険                                                                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>禁 止  | ●心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。 |
| <br>感電注意 | ●作動中（治療中を含む）に電源コードを直接抜かないでください。         |

| ⚠ 警告                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>禁 止 | <ul style="list-style-type: none"><li>●取扱説明書に記載されている治療以外の目的には絶対に使用しないでください。</li><li>●子供には単独で使わせないでください。</li><li>●この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。</li><li>●他の治療器との同時使用はしないでください。</li><li>●作動中に、パッドやコントローラーに水を付けたり、水を掛けたりしないでください。</li><li>●入浴中の治療は行わないでください。<br/>また、濡れた手での操作は行わないでください。</li><li>●AC100V以外では使用しないでください。</li><li>●コード類を曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、加工するなどしないでください。また重いものを乗せないでください。</li><li>●パッドをピン・針・刃物などできずつけないでください。</li><li>●コントローラー内部に金属物や異物を入れないでください。</li><li>●作動中にプラグの抜き差しはしないでください。</li><li>●頭部には使用しないでください。</li></ul> |

### 修理の手順

#### 1. 電話で修理を依頼する

- ・お買い上げいただいた販売店に電話で修理をご依頼ください。
- ・ご依頼の際に、故障状況をお伺いしますので、事前に故障状況の確認をお願いいたします。

#### 2. 着払いで送付する

- ・運送により破損しないよう十分に梱包の上、着払いにてお送りください。  
通常の宅配による運送費に限り、販売店が負担いたします。
- ・航空便・引越便などによる着払いにてお送りいただいた場合は、お受け取りできませんのでご注意ください。

#### 3. 修理の実施

- ・お客様負担の修理費用が発生する場合は、事前に金額をご連絡いたします。
- ・修理の実施にあたり、使用状況や使用環境などの確認をさせていただく場合がございます。
- ・修理は指定の修理業者が責任を持って実施いたします。

#### 4. 修理完了品を受け取る

- ・修理完了後は、原則として指定の宅配便にてお届けいたします。
- ・修理完了品をお受け取りの際は、同梱の修理明細書をご確認ください。

### 修理代金のお支払い方法などについて

#### ー修理代金のお支払い方法ー

- ・修理代金は修理完了品のお届け時に販売店指定の宅配業者へ現金でお支払いください。
- ・代金引換（代引）払いのみのお取り扱いとさせていただきます。
- ・お振込、クレジットカードなどでのお支払いはお受けできませんのでご注意ください。

#### ー領収書の発行ー

- ・販売店指定の宅配業者が発行する領収書をもって、正式な領収書とさせていただきます。
- ・販売店からの領収書の発行は行っておりませんのでご了承ください。

#### ーそ の 他ー

- ・修理のご依頼にもとづき、点検などを行った結果、対象機器に異常がない場合でも点検技術料などを請求させていただく場合がございます。  
点検品お届け時、販売店指定の宅配業者へ直接現金でお支払いください。

### 保証書について 保証内容のご確認と保管のお願い

1. 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についてあります。
2. 保証内容をご確認の上、必ずお客様のお名前・製品到着日・販売店名などの所定記載事項を記入し、大切に保管してください。
3. 保証書の再発行はいたしません。紛失されないようご注意ください。

■取扱説明書に記載した使用目的および取り扱い方法以外での使用によって生じた直接・間接損害については、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。



## 仕様

| 項目         |            | 内容                       |
|------------|------------|--------------------------|
| 品名         |            | 家庭用温熱治療器 リブホット           |
| 定格電圧       |            | AC100V 50/60Hz           |
| 定格消費電力     |            | 30W                      |
| パッド表面温度    |            | 最大約 45℃                  |
| 温度調節機構     |            | サーミスタによるトライアック制御（電子制御回路） |
| 安全装置       |            | 自動温度調節回路／温度過昇防止回路        |
| タイマー       |            | タイマー回路                   |
| タイマー時間     |            | 15 分、30 分、60 分           |
| 寸法         | パッド        | 250(縦)×330(横)×16(厚さ)mm   |
|            | バンド 大<br>小 | 100(幅)×1,200(長さ)mm       |
|            |            | 100(幅)×600(長さ)mm         |
|            | コントローラー    | 59.5(幅)×155(長さ)×29(厚さ)mm |
| 電源コード      |            | 2.5m                     |
| 出力コード      |            | 1.5m                     |
| 本体重量       |            | 約730g                    |
| 管理医療機器認証番号 |            | 222AKBZX00128000         |

## アフターサービス・保証

本製品が万一故障と思われるときは、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。  
本製品の製造販売元が指定した修理業者以外での修理は法律によって定められた規格および安全性が保証できなくなりますので、絶対に行わないでください。

### 保証期間と点検・修理について

正常な使用状態で故障した場合には、保証書記載事項にもとづき無償修理いたします。  
保証書をご提示の上、お買い上げいただいた販売店にご依頼ください。

#### 本体の保証期間（製品到着日から） 1 年間

※但し、付属品・消耗品を除く。

#### ー保証期間内の場合ー

- ・修理代金は無償です。
- ・保証期間内であっても保証規定による無償修理対象外の場合は有償修理となります。
- ・修理品送付時に保証書もお送りください。保証書のご提示がない場合は有償修理となります。

#### ー保証期間経過後の場合ー

- ・修理代金が必要になります。
- ・代金のお支払いは修理完了品のお届け時、当社指定の宅配業者へ直接現金でお支払いください。  
（右記の「修理代金のお支払い方法などについて」の項をご参照ください。）

### ご使用上の注意

|  警告       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>分解禁止  | ●分解や改造は行わないでください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br>禁止    | ●パッドやコードに損傷、断線などがあるときは使用せず、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。<br>●停電の時はただちに電源スイッチを切り、温度設定つまみは「低」、タイマー設定つまみは「15分」の位置にしてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>指 示 | ●次の人は、医師とご相談の上ご使用ください。<br>1. 悪性腫瘍や心臓に障害のある人。<br>2. 妊娠初期の不安定期または出産直後の人。<br>3. 体温 38℃以上（有熱期）の人。<br>例 1：急性炎症症状〔倦怠感・悪寒・血圧変動など〕の強い時期にある人。<br>例 2：衰弱している人。<br>4. 安静を必要とする人。<br>5. 脊椎の骨折・捻挫・肉離れなど、急性疼痛性疾患の人。<br>6. 糖尿病などによる高度な抹消循環障害による知覚障害のある人。<br>7. 温度感覚喪失が認められる人。<br>8. 低温やけどをしたことのある人。<br>9. 適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人。<br>10. 子供が使用するときは、必ず保護者のもとで使用してください。<br>11. 上記以外に体調に異常を感じたとき。<br>●本製品は一人用です。複数の人では同時に使用できません。<br>●本製品の導子（パッド）は、皮膚に直接当てず衣服や布等を介して使用してください。<br>●必ず本製品専用の付属品を使用してください。<br>●電源プラグを抜くときは、コード部分を持たずに必ず先端のプラグ部分を持ってください。<br>●治療は適切な温度、治療時間で行ってください。<br>●安全装置が作動して通電が停止することがあります。一旦電源スイッチを切りしばらくして電源を入れ直しても改善されない場合は故障が考えられます。ただちにご使用を中止し、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。<br>●安全装置が頻繁に作動する場合は、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。<br>●治療中は体調に注意してください。体調に異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。<br>●本製品の操作は定められた手順で行ってください。<br>●パッドは清潔にして保管してください。 |

## ■ ご使用になる前に ( 安全上のご注意 )

### ご使用上の注意

|  <b>警告</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>電源プラグを<br>コンセントから抜く   | <ul style="list-style-type: none"><li>●落雷などによる停電の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li><li>●本体に異常が生じた場合はただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <b>注意</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>禁 止                  | <ul style="list-style-type: none"><li>●パッドを無理に折りたたんだり丸めた状態で使用および保管しないでください。</li><li>●過電流による発火、燃焼のおそれがあるため電源のタコ足配線はしないでください。</li><li>●コントローラーの差し込みプラグを他の電気製品に接続しないでください。</li><li>●浴室などの高温、多湿な場所では使用しないでください。</li><li>●ストーブなどの熱源のそばで使用しないでください。</li><li>●パッドやコントローラーの上には、重いものを置かないでください。また、飲み物などを置かないでください。</li><li>●治療中、パッドやコントローラーにふとんなどを積み重ねたり保温性の良いもので覆わないでください。</li><li>●睡眠薬などを服用した人および酩酊状態の人は温熱治療を行わないでください。</li><li>●直射日光などがあたり熱くなる場所には置かないでください。</li><li>●コントローラーを高いところから落としたり踏みつけたり、強い振動を与えないでください。</li></ul> |
| <br>指 示                 | <ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用前に電源スイッチ、温度設定つまみ、タイマー設定つまみが正しく作動するか確認してください。</li><li>●電源プラグにほこりが付着している場合は拭き取ってください。</li><li>●次の人は、医師とご相談の上にご使用ください。<ol style="list-style-type: none"><li>1. 高血圧や不整脈、貧血ぎみの人。</li><li>2. 睡眠時無呼吸症や喘息の人。</li></ol></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br>電源プラグを<br>コンセントから抜く | <ul style="list-style-type: none"><li>●落雷のおそれがある場合は使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ■ 製品の取り扱いについて

### パッドなどのお手入れ

- パッドなどが汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭くか、ぬるま湯や薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭いてください。
- バンドは丸洗い、ドライクリーニングなどの洗濯はできません。中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布を固く絞って拭いてください。その後は十分乾燥させてください。

### 収納と保管の仕方

- パッド・コントローラー・バンドなどは、次回のご使用に支障の無いように清浄にし、直射日光のあたる場所、湿度・温度の高い場所、ほこりの多い場所には保管しないでください。

※しばらく使用しなかった場合は、本取扱説明書の（安全上のご注意）をお読みいただき、パッドやコントローラーが正常で安全に動作する事を確認してご使用ください。

※パッド・コントローラー・バンドなどを廃棄する場合は、お住まいの地域の決まりに従って廃棄してください。

## ■ 効能効果

### 一 電熱による温熱効果一

※一般家庭で使用する事。

#### 【温熱効果とは】

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉の[こり]をほぐす
- 神経痛、筋肉痛の痛みの緩解
- 胃腸の働きを活発にする

## 治療の方法

### 治療の注意事項



警告



禁止

- 頭部には使用しないでください。

※上記を守らないと、感電や事故・火災・故障・けが・体調不良などの原因となります。  
※お身体に異常を感じた場合は、医師に相談してください。



注意



禁止

- 余熱でコードがよじれてしまうおそれがありますので、使用後にコードをパッドの上に乗せないでください。
- 治療中に眠らないでください。



指示

- 治療中熱く感じる場合は、低温やけどをおこすおそれがありますのでパッドを外してください。
- 低温やけどを防ぐため同一箇所での治療は1時間以内で使用してください。
- 皮膚知覚障害の人が使用するときは、必ず介護者の監視のもとで使用してください。
- お身体の自由がきかない人や幼児には使用させないでください。



やけど注意

【低温やけどについて】  
一般的にやけどといえば、火・熱湯・油など高温のものが皮膚に触れておこるものですが40℃程度の比較的低い温度でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると（使用状態や体質によっても異なります。）低温やけどをおこす場合があります。  
特にお年寄りの方が使用される際には、周囲の人が使用温度に十分にご注意ください。  
赤い斑点や水ぶくれなど、お身体に異常が認められた場合には、ただちに専門医の診断を受けてください。




電源プラグを  
コンセントから抜く

- 落雷のおそれがある場合は使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※上記を守らないと、感電や事故・火災・故障・けが・体調不良などの原因となります。  
※お身体に異常を感じた場合や、しばらくしても効果があらわれない場合は、医師または専門家に相談してください。


## 製品の確認

商品がお手元に届きましたら、お客様ご自身で箱の中身をご確認ください。  
不足のものがありましたら商品到着後2週間以内に、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

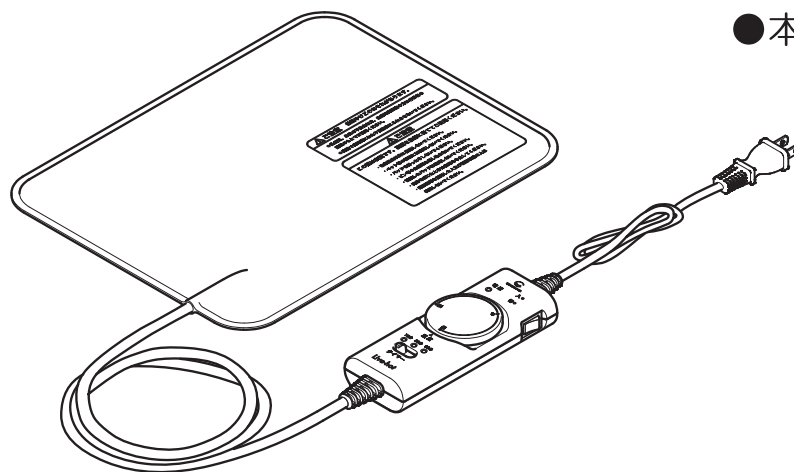

●本体 1式

- ・パッド部
- ・コントローラー部

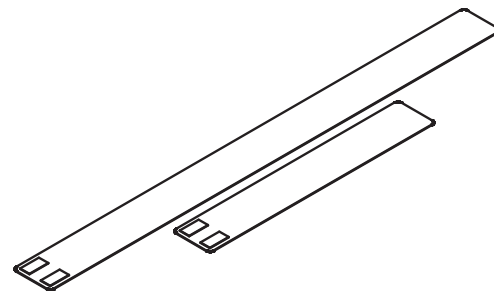

●バンド 大 1枚  
小 1枚


●取扱説明書 1冊（本書）

●添付文書

製品の確認

# 各部の名称とはたらき

## 本 体

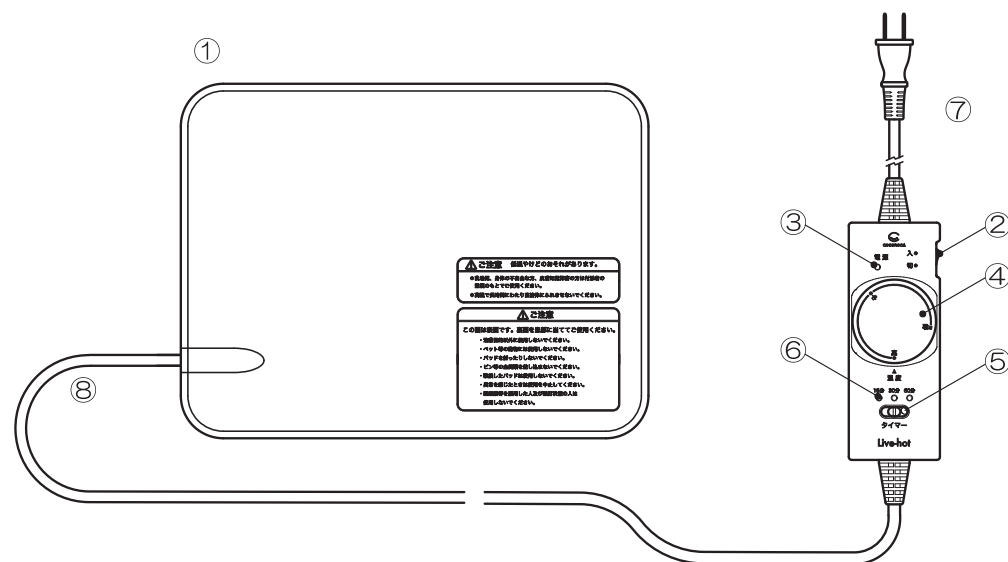

各部の名称とはたらき

| 名 称          | はたらき                                        |
|--------------|---------------------------------------------|
| ①パッド         | 電気を熱に変換して温熱治療に用います。                         |
| ②電源スイッチ      | 電源の「入」・「切」を行います。                            |
| ③電源表示灯       | 電源が「入」の時に橙色に点灯します。                          |
| ④温度設定つまみ     | 治療温度の設定を行います。                               |
| ⑤タイマー設定つまみ   | 治療時間を設定します。                                 |
| ⑥タイマー表示灯     | 設定したタイマー時間の箇所が緑色に点灯します。<br>設定時間が終了すると消灯します。 |
| ⑦電源コード / プラグ | 接続したコンセントから電気が供給されます。                       |
| ⑧出力コード       | パッドに電気の供給をします。                              |

## バンド




| 名 称       | はたらき                 |
|-----------|----------------------|
| ⑨⑩バンド 小／大 | パッドを身体に固定する場合に使用します。 |

# 治療の方法


## 操作方法

この操作方法を良くお読みいただき、正しく安全にお使いください。


- 1 コントローラーの電源プラグを家庭用コンセントに確実に差し込みます。
- 2 治療したい部位にパッドをあて、バンド小もしくは大で固定します。  
※パッドには表と裏があります。表面の注意書きを良く読んで使用してください。  
※パッドは二つ折りなどせずに装着してください。

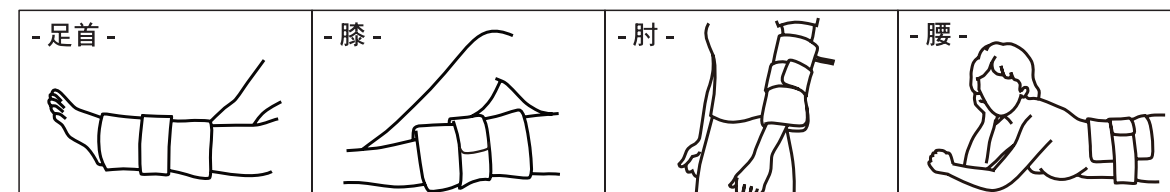


- 3 タイマー設定つまみを左右に動かし、治療時間を15分／30分／60分から選び「カチッ」と音のする所につまみを設定してください。  
※電源を入れたら、タイマー表示灯を必ず確認してください。  
※治療中に治療時間を変更しても連続治療時間は最大 60 分で終了します。  
※治療頻度・治療時間は 1 部位につき 1 日 1 回、60 分以内としてください。

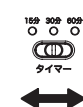

- 4 電源スイッチを「入」にします。  
※電源を入れると電源表示灯が橙色に点灯し、パッドの温度が上昇し始めます。  
※タイマー表示灯も設定した箇所点灯します。

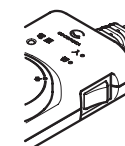

- 5 温度設定つまみを回し「低」～「高」の設定したい範囲をコントローラー本体の三角マークに合わせます。

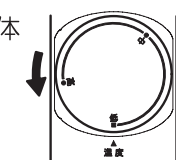

- 6 設定時間が終了するとタイマー表示灯が消灯し、自動的にパッドの電気が切れます。  
※治療を途中で止める場合は電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 7 治療が終了したらコントローラーの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグを持って行ってください。
- パッドのお手入れは「パッドなどのお手入れ P11」をご参照ください。
- 電源プラグが確実に差し込まれていても点灯しない場合は、ただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。
- 治療中に製品に異常が起きると、設定されたタイマー表示灯が点滅します。  
ただちに電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。